
# Акционерное общество
# «МЕДИУС»

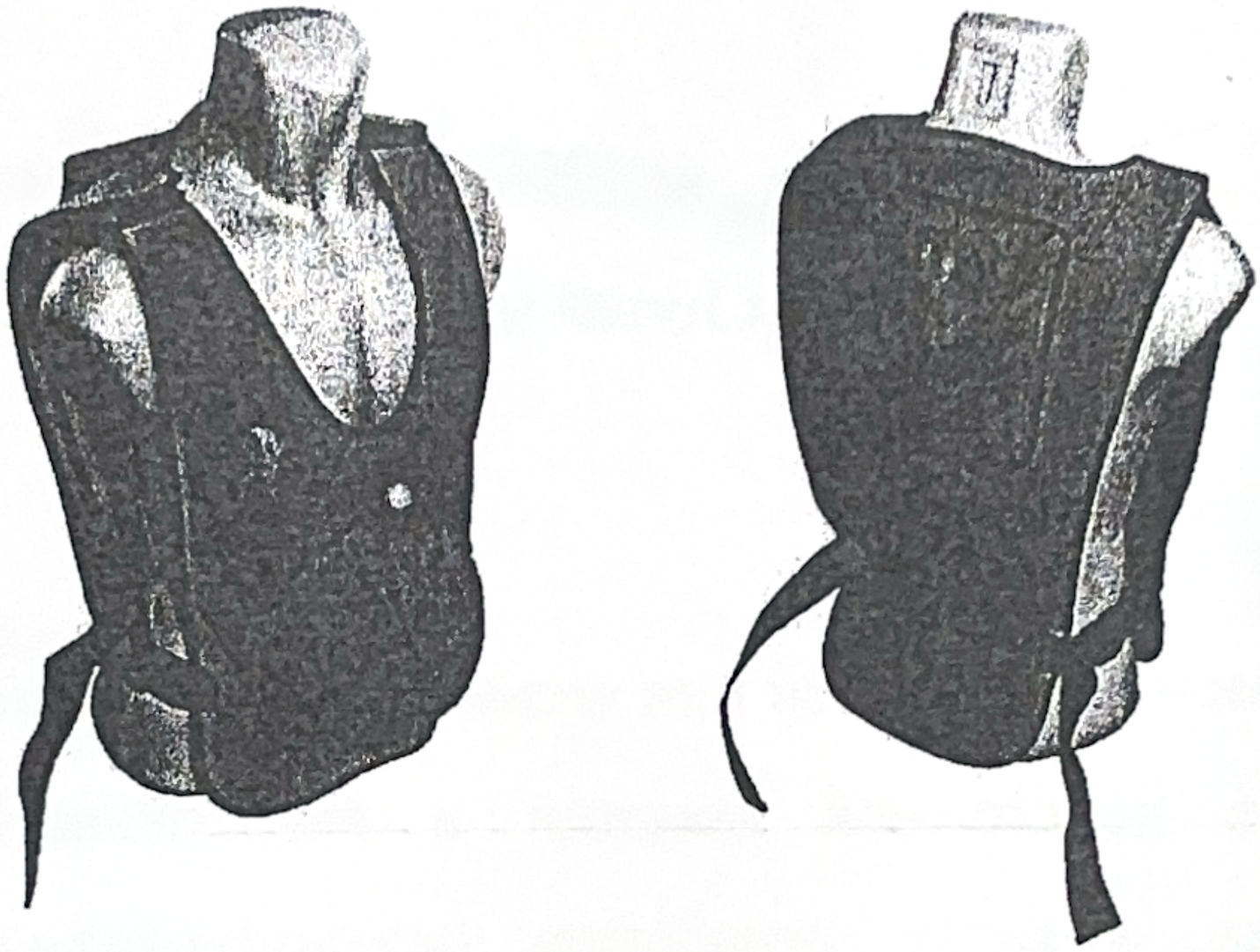

## Т30 Тренажер-жилет «Пётр»
## для отработки приемов Геймлиха

## ТУ 32.99.53-005-01899511-2020.

## Руководство по эксплуатации.

## Тренажер-жилет «Пётр»
## для отработки приемов Геймлиха

**Введение**

Жилет для отработки навыков первой помощи при обструкции дыхательных путей инородным телом.

Назначение:

Надев жилет на манекен или человека, можно имитировать оказание неотложной помощи и практиковать прием Геймлиха, а также отработать ситуацию самопомощи. Прием можно проводить в положении стоя, сидя или лежа.

**Технические характеристики:**

Грудная часть с регулируемыми лямками общая длинна ≥ 89 см., ширина ≥ 34 см., Спина - длина ≥ 61 см., ширина ≥ 35,5 см. Передняя часть жилета имитирует грудную клетку и дыхательные пути, перекрытые инородным предметом. При правильном выполнении диафрагмальных толчков, инородный предмет вылетает из дыхательных путей. На задней части находится подушка для смягчения ударов по спине. Ремни регулируются по размеру.




## Тренажер-жилет «Пётр»
## для отработки приемов Геймлиха

Задняя сторона



Подушка для ударов по спине

Изготовлен с использованием прочного неопрена.

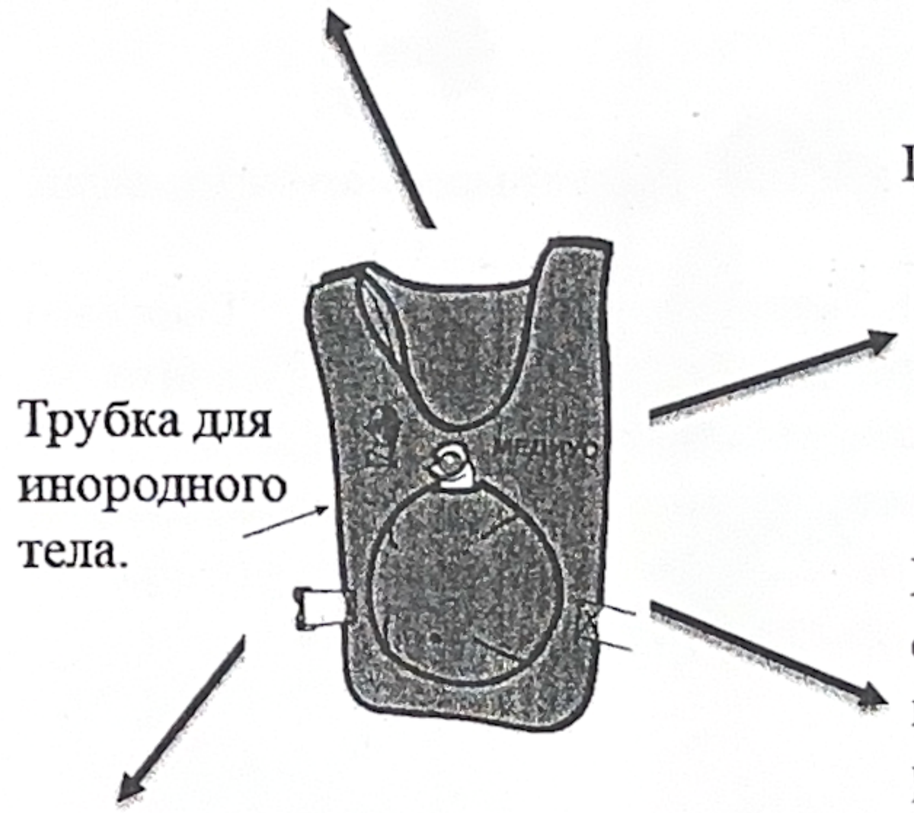

Поместите руки на середину воздушной камеры.

Трубка для инородного тела.


Пупок помогает определить правильное размещение рук.

Большие быстросъёмные пряжки с регулируемыми ремнями. Универсальный размер

# Руководство по применению

Наденьте жилет через голову и плотно подтяните поясной ремень.

Вложите имитатор инородного тела в трубку.

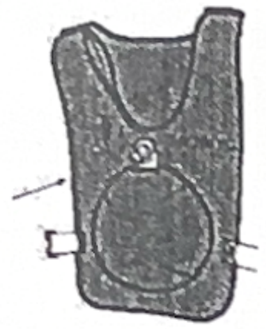

Используйте заднюю подушку для отработки навыков ударов по спине.



- Сожмите одну руку в кулак. Расположите его чуть выше пупка пострадавшего.
- Захватите сжатый кулак другой рукой. Быстрым направленным вверх движением с силой надавите на живот, как бы пытаясь приподнять пострадавшего.
- - Выполните серию из 4-5 под диафрагмальными толчками. Если инородное тело, вызвавшее удушье, не сдвинулось с места, повторите весь цикл.









- Обхватите пострадавшего обеими руками.
- Сожмите одну из рук в кулак и той стороной кулака, где находится большой палец, придавите место живота потерпевшего между пупком и рёбрами. Эта область живота называется эпигастральной.
- Сделать несколько резких толчков: вначале внутрь, а затем вверх. При этом обе руки надо потянуть вначале назад, а потом — кверху. Движения рекомендуется выполнять резко, чётко и быстро.

Количество толчков — от пяти до десяти.


Результатом правильных действий приведет к вылету инородного тела из трубки.



Признак того, что метод Геймлиха сработал - человек может самостоятельно дышать, и цвет его лица стал нормальным. Если предмет все еще мешает дышать - вызовите скорую. Не оставляйте пострадавшего одного и до приезда врачей продолжайте применять прием Геймлиха.

# Руководство по очистке

Вручную очистите жилет при помощи мягкого моющего, средства, просушите на воздухе.

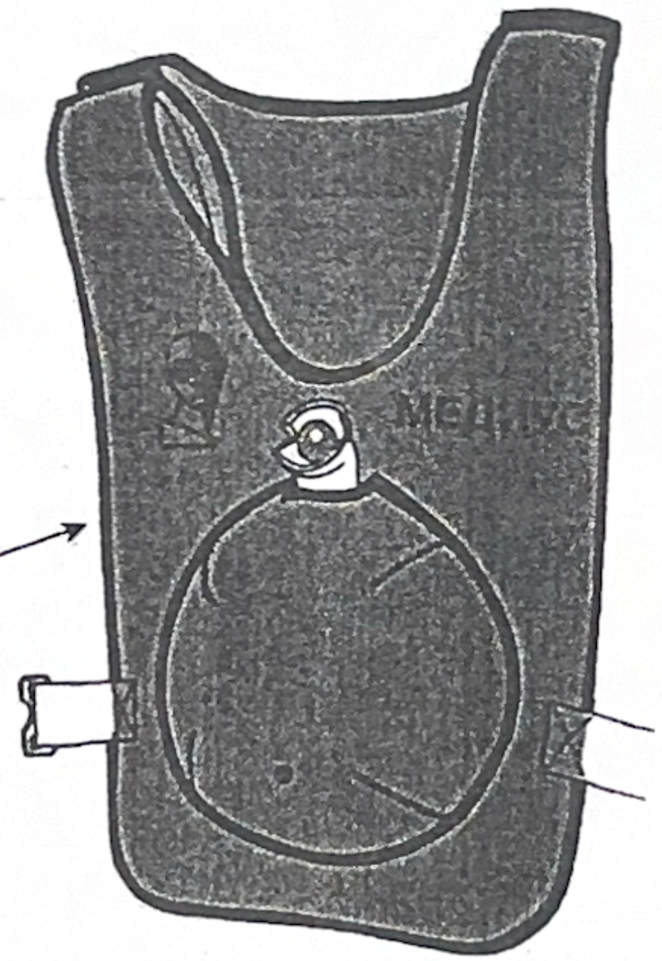

Фиксирующие ремни на застежках





## VIII. Упаковочный лист.

| | |
|---|---|
| Тренажер-жилет | 1 |
| Сумка для хранения | 1 |
| Имитатор инородного тела (Круглой формы) | 10 |
| Трубка для инородного тела | 1 |
| Руководство по эксплуатации (паспорт) | 1 |

## VIII. Паспорт.

Сведения о приемке:

Дата выпуска_____

ОТК_____

## Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок составляет 6 месяцев со дня подписания акта приема-передачи или накладной.

Срок эксплуатации 3 года.

Производитель: АО «МЕДИУС»
Юридический адрес/ фактический адрес/почтовый адрес:
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д.4а
тел./факс: +7 (812) 764-43-01 ,764-12-76
e-mail: manager14@medius.ru
Посетите наш сайт в Интернете: www.medius.ru