Производитель: АО «МЕДИУС»
Юридический адрес/ фактический адрес/почтовый адрес:
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д.4а
тел./факс: +7 (812) 764-43-01 ,764-12-76
e-mail: manager14@medius.ru
Посетите наш сайт в Интернете: www.medius.ru

Акционерное общество
«МЕДИУС»



Т30 Тренажер-жилет «Пётр» для отработки приемов Геймлиха

ТУ 32.99.53-005-01899511-2020.

Руководство по эксплуатации.

Введение

Жилет для отработки навыков первой помощи при обструкции дыхательных путей инородным телом.

Назначение:

Надев жилет на манекен или человека, можно имитировать оказание неотложной помощи и практиковать прием Геймлиха, а также отработать ситуацию самопомощи. Прием можно проводить в положении стоя, сидя или лежа.

Технические характеристики:

Грудная часть с регулируемыми лямками общая длинна ≥ 89 см., ширина ≥ 34 см., Спина - длина ≥ 61 см., ширина ≥ 35,5 см. Передняя часть жилета имитирует грудную клетку и дыхательные пути, перекрытые инородным предметом. При правильном выполнении диафрагмальных толчков, инородный предмет вылетает из дыхательных путей. На задней части находится подушка для смягчения ударов по спине. Ремни регулируются по размеру.

Тренажер-жилет «Пётр»
для отработки приемов Геймлиха

VIII. Упаковочный лист.

Тренажер-жилет	**1**
Сумка для хранения	1
Имитатор инородного тела (Круглой формы)	10
Трубка для инородного тела	1
Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

VIII. Паспорт.

Сведения о приемке:

Дата выпуска_____

ОТК_____


Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок составляет 6 месяцев со дня подписания акта приема-передачи или накладной.

Срок эксплуатации 3 года.

Руководство по очистке

Вручную очистите жилет при помощи мягкого моющего, средства, просушите на воздухе.

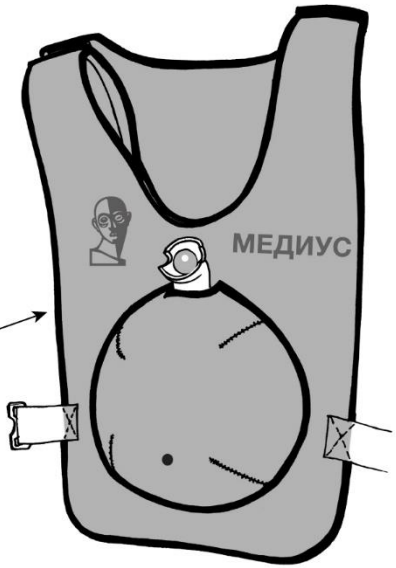

Фиксирующие ремни на застежках


Тренажер-жилет «Пётр»
для отработки приемов Геймлиха

Задняя сторона



Подушка для ударов по спине

Изготовлен с использованием прочного неопрена.

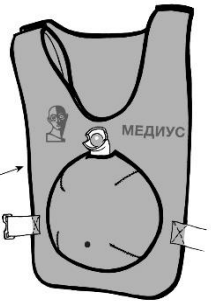

Поместите руки на середину воздушной камеры.

Трубка для инородного тела.


Пупок помогает определить правильное размещение рук.

Большие быстросъёмные пряжки с регулируемыми ремнями. Универсальный размер

Руководство по применению

Наденьте жилет через голову и плотно подтяните поясной ремень.

Вложите имитатор инородного тела в трубку.

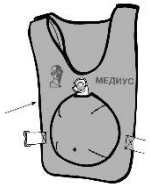

Используйте заднюю подушку для отработки навыков ударов по спине.



- Сожмите одну руку в кулак. Расположите его чуть выше пупка пострадавшего.
- Захватите сжатый кулак другой рукой. Быстрым направленным вверх движением с силой надавите на живот, как бы пытаясь приподнять пострадавшего.
- - Выполните серию из 4-5 под диафрагмальными толчками. Если инородное тело, вызвавшее удушье, не сдвинулось с места, повторите весь цикл.





- Обхватите пострадавшего обеими руками.
- Сожмите одну из рук в кулак и той стороной кулака, где находится большой палец, придавите место живота потерпевшего между пупком и рёбрами. Эта область живота называется эпигастральной.
- Сделать несколько резких толчков: вначале внутрь, а затем вверх. При этом обе руки надо потянуть вначале назад, а потом — кверху. Движения рекомендуется выполнять резко, чётко и быстро.

Количество толчков — от пяти до десяти.

Результатом правильных действий приведет к вылету инородного тела из трубки.



Признак того, что метод Геймлиха сработал - человек может самостоятельно дышать, и цвет его лица стал нормальным. Если предмет все еще мешает дышать - вызовите скорую. Не оставляйте пострадавшего одного и до приезда врачей продолжайте применять прием Геймлиха.